



DISPOSITIVI PER MONITORAGGIO APNEE E POLISOMNOGRAFIA

Trasduttori sensori per Polisonnografia, compatibili con Embla, Embletta, Compumedics,

Alice 4/5/6 series, Stardust, Sandman. Disponibili anche con connessioni 1,5mm DIN 42802 safety standard.




Maschere in Tessuto per CPAP - BIPAP. Non più allergie, decubiti o arrossamenti sul viso. Utilizzabili con tutte le CPAP e BIPAP in commercio. Riutilizzabile e lavabili.



AR-300003-B Maschera Orale-Nasale ANEW Mis. Media/Regular
AR-300003-Bs come sopra Mis. Piccola/Small
AR-300003-BL come sopra Mis. Grande/Large
AR-300002-B Maschera Nasale ELAN Mis. Media/Regular
AR-300002-Bs come sopra mis. Piccola/Small
AR-300002-BL come sopra mis. Grande/Large
AR-300001-B Maschera Nasale ADVANCE Misura Unica

CPAP PICCOLA, Dimensioni palmari, leggera ed utilizzabile sia a casa che durante gli spostamenti di lavoro e in vacanza. Di base fornita con filtro unificatore HME (umidificazione Passiva). Non necessita di acqua. Funzionamento a rete 220V(casa) e a batteria(durante viaggio o spostamenti).

Opzionali: Umidificatore ad acqua , batteria per 8 o 16 ore di utilizzo.

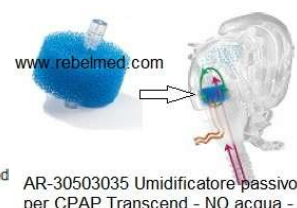

CONCENTRATORE OSSIGENO Piccolo e portatile per utilizzo a casa, in vacanza, viaggio.

Funzionamento a batteria e a rete 220V – casa - . NON necessita di Bombola Ossigeno per Funzionamento.

PESO 2,2Kg; dimensioni: 22 x 18 x 8cm





The inductance of the inductive band is exactly proportional to the cross section area of the bands closed loop around the body. It therefore changes as the patient breathes.

The electronics in the system or interface box measure these inductance changes to generate a signal that is the most accurate and reliable replication of respiration waveforms.

SleepSense Inductive Effort Bands share these advantages:

- 2 types of inductance band's to suit your patient needs
 - Reusable: One Size Fits Most – 1 Year Warranty
 - Semi-Reusable: Low cost solution, multiple sizes, velcro tabs make adjustments easy
- Easy cleaning (machine wash, autoclave or pasteurize)
- Made with high-quality, soft and flexible material for added patient comfort
- Use with SleepSense Inductive Interface Cables to connect to any system



SleepSense Reusable Inductive Belts

- One size fits all (Adult)
- Easy to clean
- High quality comfortable material



AR-279010

Sleep sense reusable inductive belt

SleepSense Semi-Reusable Inductive Belts

- Multiple sizes (neonate - XXL)
- Expected life of more than 70 uses, low cost per use
- Velcro tabs make adjustments easy



AR-27 9002S

Neonatal Belt (2-pack)

AR-27 9002-L40

Infant Belt (2-pack)

AR-27 9002-L60

Pediatric (2-pack)

AR-27 9002-L90

Adult Large (2-pack)

AR-27 9002-L120

Adult XLarge (2-pack)

AR-27 9002-L150

Adult XXL (2-pack)



AR-27 9003-L40

Infant Inductive Belt – BLUE (2-pack)

AR-27 9002-L60

Pediatric Belt - BLUE (2-pack)

AR-27 9002-L90

Adult Large Belt (2-pack)

AR-27 9002-L120

Adult XLarge Belt (2-pack)

AR-27 9002-L150

Adult XXLarge Belt (2-pack)



AR-27 9101 Abdomen/standard DIN connectors
AR-27 9102 Chest/Standard DIN Connectors



AR-279201-Kit Multi-RIP Inductive Interface module w/SUM Channel
*Kit includes SUM Module (#**AR-279201**) abdomen wireset (#**PS AR-279202**), chest wireset (#**PS AR-279203**), and SUM/output wireset (#**PS AR-279204**). Connects to any SleepSense Inductive Band – AAA Batteries.

System Specific Inductive Interface Cables



AR-279101A3 Alice 3 Compatible Abdomen Interface Cable
AR-279102A3 Alice 3 Compatible Chest Interface Cable

AR-279101A4 Alice 4 Compatible Abdomen Interface Cable
AR-279102A4 Alice 4 Compatible Chest Interface Cable

AR-279101A5 Alice 5 Compatible Abdomen Interface Cable
AR-279102A5 Alice 5 Compatible Chest Interface Cable





EMBLA COMPATIBLE – KEY CONNECTOR

AR-279141 Emla Compatible Abdomen Interface Cable/1.5ft

AR-279142 Alice 5 Compatible Chest Interface Cable/1.5ft

AR-279151 Emla Compatible Abdomen Interface Cable/8ft

AR-279152 Alice 5 Compatible Chest Interface Cable/8ft

SleepSense RIP/Inductive Kits



AR-279100-Kit Semi Reusable Inductive System – Adult

Kit includes:

- # AR-279002-L90
- # AR-279002-L120
- # AR-279101
- # AR-279102



AR-279100B-Kit Semi Reusable Inductive System BLUE – Adult

Kit includes:

- # AR-279002-L90
- # AR-279002-L120
- # AR-279101
- # AR-279102



AR-279010-Kit Semi Reusable Inductive System BLUE – Adult

Kit includes:

- # AR-279010 (2)
- # AR-279101
- # AR-279102



AR-279212-Kit SUM CHANNEL, SEMI-REUSABLE INDUCTIVE SYSTEM

Kit includes:

- # AR-279002-L90
- # AR-279002-L120
- # AR-279201-KIT



AR-279212B-Kit SUM CHANNEL, BLUE SEMI-REUSABLE INDUCTIVE SYSTEM

Kit includes:

- # AR-279003-L90
- # AR-279003-L120
- # AR-279201-KIT



AR-279210-Kit SUM CHANNEL, REUSABLE INDUCTIVE SYSTEM

Kit includes:

- # AR-279010 (2)
- # AR-279201-KIT



AR-279100A5-Kit ALICE 5 COMPATIBLE, SEMI REUSABLE INDUCTIVE SYSTEM

Kit includes:

- # AR-27 9002-L90
- # AR-27 9002L-120
- # AR-27 9101A5
- # AR-27 9102A5



AR-279100A5B-Kit ALICE 5 COMPATIBLE, BLUE SEMI REUSABLE INDUCTIVE SYSTEM

Kit includes:


- # AR-27 9003-L90
- # AR-27 9003-L120
- # AR-27 9101A5
- # AR-27 9102A5



AR-279100A5-Kit ALICE 5 COMPATIBLE, REUSABLE INDUCTIVE SYSTEM

Kit includes:

- # AR-279010 (2)
- # AR-279101A5
- # AR-279102A5

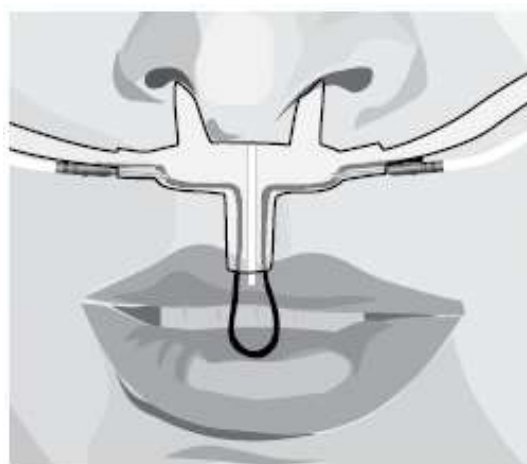



SleepSense Respiration Effort Sensors provide a clear, artifact-free, qualitative indication of respiration.

Choose between Piezo Crystal or Piezo Film technologies. Each provides optimal matching with your recording needs and system specifications.

SleepSense Effort Sensors share these advantages:

- Isolated element increases immunity to environmental artifacts
- High sensitivity provides improved signal stability if sensor shifts during the night
- Small size and smooth contour for improved patient tolerance





System Specific Piezo Effort Sensors

Alice Compatible Sensors



AR-271397-Kit **ALICE 3 COMPATIBLE, PIEZO CRYSTAL EFFORT SENSOR KIT DOUBLE BUCKLE**
Kit includes:
- # **AR-271397** SENSOR
- # **AR-271350** DOUBLE BUCKLE BAND

AR-271397 **ALICE 3 COMPATIBLE, PIEZO CRYSTAL EFFORT SENSOR**



AR-271398-Kit **ALICE 4 COMPATIBLE, PIEZO CRYSTAL EFFORT SENSOR KIT DOUBLE BUCKLE**
Kit includes:
- # **AR-271398** SENSOR
- # **AR-271350** DOUBLE BUCKLE BAND

AR-271398 **ALICE 4 COMPATIBLE, PIEZO CRYSTAL EFFORT SENSOR**



Alice Compatible Sensors (Continued)

AR-271399-Kit ALICE 5 COMPATIBLE, PIEZO CRYSTAL EFFORT SENSOR KIT DOUBLE BUCKLE

Kit includes:

- # **AR-271399** SENSOR
- # **AR-271350** DOUBLE BUCKLE BAND

AR-271399 ALICE 5 COMPATIBLE, PIEZO CRYSTAL EFFORT SENSOR



AR-27612166-SLP KIT STARDUST COMPATIBLE, PIEZO CRYSTAL EFFORT SENSOR KIT DOUBLE BUCKLE

Kit includes:

- # **AR-27612166-SLP** SENSOR
- # **AR-271350** DOUBLE BUCKLE BAND

AR-27612166-SLP STARDUST COMPATIBLE, PIEZO CRYSTAL EFFORT SENSOR

Embla Compatible Sensors



AR-271368-Kit Embla Compatible Piezo Respiratory Effort Kit Abdomen/Key Connector

Kit includes:

- AR-271368** SENSOR
- AR-271350** DOUBLE BUCKLE BAND

AR-271368 Embla Compatible Piezo Respiratory Effort Sensor Abdomen/Key Connector



AR-271369-Kit Embla Compatible Piezo Respiratory Effort Kit Chest/Key Connector

Kit includes:

- AR-271369** SENSOR
- AR-271350** DOUBLE BUCKLE BAND

AR-271369 Embla Compatible Piezo Respiratory Effort Sensor Chest/Key Connector



Alice Compatible Sensors

AR-271258 Alice 3 Compatible Electret Snore Sensors



AR-271261 Alice 4 Compatible Electret Snore Sensors



AR-271262 Alice 5 Compatible Piezo Snore Sensors



Embla Compatible Sensors

**AR-271268 Embla Compatible Piezo Snore Sensor
23.5in/60cm/Key Connector**



**AR-271269 Embla Compatible Piezo Snore Sensor
78in/200cm/Key Connector**



Thermistors

- Provide strongest and most accurate respiration airflow signal
- Easy to use and clean
- Powered by our interface box or your PSG System



AR-271450-Kit
AR-271450S
AR-271450B

Thermistor Flow Sensor Kit
Thermistor Flow Sensor/Key Connector
Thermistor Flow Sensor Interface Box/Safety DIN Connectors



AR-271472



Thermistor Flow Sensor Adult - Standard DIN Connector

Alice Compatible Thermal Flow Sensors



AR-271459-H

Alice 3 Compatible PTFLOW Thermistor Flow Sensor

- Attaches to any brand of adult nasal cannula



AR-271459

Alice 3 Compatible Thermistor Flow Sensor



AR-271460

Alice 4 Compatible Thermistor Flow Sensor



AR-271461-H

Alice 5 Compatible PTFLOW Thermistor Flow Sensor

- Attaches to any brand of adult nasal cannula



AR-271461

Alice 5 Compatible Thermistor Flow Sensor



AR-271471



Alice 5 Pediatric Thermistor Flow Sensor



AR-271466



Alice 6 Compatible Thermistor Flow Sensor



AR-271466-H



Alice 6 Compatible PTFLOW Thermistor Flow Sensor

- Attaches to any brand of adult nasal cannula



AR-27613003-SLP
AR-27610163

Stardust Compatible Thermal Flow Sensor 17 in/44 cm
Stardust Compatible Thermal Flow Sensor 33in/84 cm



AR-271465

PDX Compatible Thermistor Flow Sensor



Sandman Compatible Thermal Flow Sensors




AR-271462-H Sandman SD 20 Compatible PTFLOW Sensor

- Attaches to any brand of adult nasal cannula



AR-271462 Sandman SD 20 Compatible Thermistor Flow Sensor

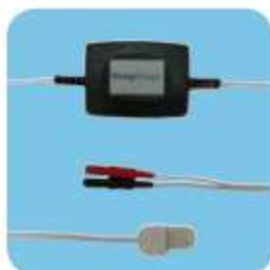

AR-271417 BreathSensor Cable for Sandman 32



AR-271418 BreathSensor Cable for Sandman 20



Embla Compatible Thermal Flow Sensors



AR-271422-H

**Embla Compatible PTFLOW Thermocouple Flow Sensor
78in/200cm - Key Connector**

- Attaches to any brand of adult nasal cannula



AR-271468-H

**Embla Compatible PTFLOW Thermistor 35.5in/90cm
Key Connector**

- Attaches to any brand of adult nasal cannula



AR-271468

**Embla Compatible Airflow Thermistor 35.5in/90cm
Key Connector**



AR-271469

**Embla Compatible Airflow Thermistor 78in/200cm
Safety DIN Connectors**




Disposable Thermal Airflow Sensors



AR-271415V2

**Disposable Flow Sensor Interface Cable/
Safety DIN Connectors**

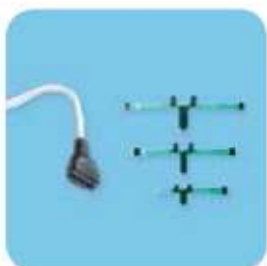

AR-271426-20-Kit / **Disposable Thermocouple Kit (Adult)/Safety DIN Connectors**

Kit includes:

AR-271426 (20 pack)

AR-271415V2



AR-271427-20-Kit / **Disposable Thermocouple Kit (Pediatric)
Safety DIN Connectors**

Kit includes:

AR-271427 (20 pack)

AR-271415V2

AR-271428-20-Kit / **Disposable Thermocouple Kit (Infant)
Safety DIN Connectors**

Kit includes:

AR-271428 (20 pack)

AR-271415V2



AR-271426-20

AR-271427-20

AR-271428-20

**Disposable Flow Sensors - Adult (20 pack)
Disposable Flow Sensors - Pediatric (20 pack)
Disposable Flow Sensors - Infant (20 pack)**



SleepSense Body Position Sensors provide the most accurate indication of sleep posture in the industry. Small and robust, they will provide many nights of high quality service.

SleepSense Body Position Sensors share these advantages:

- Unique design with improved tracking of video-reported positions
- Improved body attachment ensures alignment of sensor and body axis
- Small size and smooth contour for improved patient tolerance
- Sturdy mechanical design, 1 year warranty





Body Position Sensors

- Provides an accurate indication of sleep posture
- Improved body attachment ensures alignment of sensor and body axis
- Sturdy mechanical design



AR-271561-Kit

AC Body Position Sensor Kit/Safety DIN Connectors

Kit includes:

AR-271561 Sensor

AR-271550 Band

AR-271561

AC Body Position Sensor/Safety DIN Connectors



AR-271564V2-Kit

DC Body Position Sensor Kit/Safety DIN Connectors

Kit includes:

AR-271564V2 Sensor

AR-271550 Band

AR-271564V2

DC Body Position Sensor/Safety DIN Connectors

System Specific Body Position Sensors

Compumedics Compatible Body Position Sensors



AR-271563-Kit

Compumedics E Series DC Body Position Sensor Kit

Kit includes:

AR-271563 Sensor

AR-271550 Band

AR-271563

Compumedics E Series DC Body Position Sensor

Alice Compatible Sensors



AR-271565-Kit

Alice 3 Compatible DC Body Position Sensor Kit

Kit includes:

AR-271565 Sensor

AR-271550 Band

AR-271565

Alice 3 Compatible DC Body Position Sensor



Alice Compatible Sensors Continued



AR-271567-Kit Alice 5 Compatible DC Body Position Sensor Kit
Kit includes:

AR-271565 Sensor
AR-271550 Band

AR-271567 Alice 5 Compatible DC Body Position Sensor

Embla Compatible Body Position Sensors



**AR-271569-Kit Embla Compatible DC Body Position Sensor Kit/
Safety DIN Connectors**
Kit includes:

AR-271569 Sensor
AR-271550 Band

**AR-271569 Embla Compatible DC Body Position Sensor
Safety DIN Connectors**



**AR-271570-Kit Embla Compatible DC Body Position Sensor Kit/
5 Pin Male Connector**
Kit includes:

AR-271570 Sensor
AR-271550 Band

**AR-271570 Embla Compatible DC Body Position Sensor
5 Pin Male Connector**



AR-271571-Kit Embla Compatible Body Position Sensor Kit/Key Connector
Kit includes:

AR-271571 Sensor
AR-271550 Band

AR-271571 Embla Compatible Body Position Sensor Key Connector



AR-271575-Kit DC Body Position Sensor Kit/ 1/8" Male Plug
Kit includes:

AR-271575 Sensor
AR-271550 Band

AR-271575 DC Body Position Sensor/ 1/8" Male Plug



Sandman Compatible Body Position Sensors



AR-271576-Kit

**DC Body Position Sensor Kit/ 1/8" Female Plug
for Sandman 32**

Kit includes:

AR-271576 Sensor

AR-271550 Band

AR-271576

**DC Body Position Sensor/ 1/8" Female Plug
for Sandman 32**



AR-271578-Kit

DC Body Position Sensor Kit for Sandman SD 20

Kit includes:

AR-271578 Sensor

AR-271550 Band

AR-271578

DC Body Position Sensor for Sandman SD 20



SleepSense Limb Movement Sensors provide a clear, artifact-free, qualitative indication of movements.

Optimal positioning on the tendons ensures exceptional sensitivity.

SleepSense Movement Sensors offer these advantages:

- Use for legs and/or arms
- High sensitivity and a built-in compression filter allows tracing of movements of any size
- Small size and smooth contour for improved patient tolerance
- Easy to apply and comfortable for the patient
- Designed exclusively for limb movement





Limb Movement Sensors

- Provides a clear, artifact-free, qualitative indication of movements
- Optimal positioning on the tendons ensures exceptional sensitivity
- Easy to apply and comfortable for the patient



AR-271770-Kit

Limb Movement Sensor Kit / Safety DIN Connectors

Kit includes:

1 # AR-271770 Sensor

2 # AR-271730 Bands



AR-271772-Kit

Limb Movement Sensor Kit / Safety DIN Connectors

Kit includes:

2 # AR-271770 Sensor

2 # AR-271730 Bands



AR-271770

Piezo Limb Movement Sensor / Safety DIN Connectors



AR-271771

Piezo Limb Movement Sensor / Key Connector



AR-271726

Y Splitter Cable

For use with Item

*1726 connects two leg sensors to one input on the system.



AR-271774

Actimeter Movement Sensor - Alice 5 Compatible



SleepSense Pressure cannulas are soft, flexible, and specifically designed for sleep studies. When used with SleepSense Pressure Flow Sensors, they detect respiratory airflow and snoring measurements.

SleepSense Pressure Flow Sensors employ a piezo membrane to generate a small voltage in response to pressure changes and acoustical input. The dual output connects to nearly any system and monitors both pressure flow and snoring.

SleepSense Pressure Flow Sensors share these advantages:

Pressure Cannulas

- SleepSense Pressure Cannulas are designed with no-kink technology and are soft and comfortable for patients

- Available in 2ft or 7ft lengths

Pressure Flow Sensors

- SleepSense offers several options for Pressure Sensors, all with dual outputs for monitoring pressure flow and snore

- SleepSense Pressure Sensors are small, lightweight and durable.





Pressure Flow Sensors

- Durable, lightweight design
- Equipped with both flow and snore outputs
- Use with SleepSense pressure cannulas or ThermoCan™ Cannulas



AR-2714830

AC Pressure + Snore Sensor/Safety DIN Connectors



AR-2714831

AC Pressure Plus (Pressure + Snore)/Safety DIN Connectors



AR-2714840-Kit

Multi-Press (AC/DC Pressure Flow/Snore Sensor) Kit

Kit includes:

- AC & DC wiresets/Safety DIN Connectors
- AA Batteries



Alice Compatible Sensors



AR-2714843-Kit Multi-Press (AC/DC Pressure Flow/Snore Sensor) Kit, Alice 3 Compatible Output Cable
Kit includes:
- AC & DC wiresets/Safety DIN Connectors
- AA Batteries



AR-2714833-Kit Alice 5 Compatible AC Pressure Plus



AR-271006038-SLP Stardust Compatible Pressure Sensor



Pressure Monitoring Cannulas

- Use with any SleepSense Pressure Sensor
- Designed for patient comfort
- Low cost per use



AR-2715805

7Ft Adult Nasal Pressure Cannula

AR-2715805-

2Ft Adult Nasal Pressure Cannula

AR-2715805- FT

**7Ft Adult Nasal Pressure Cannula
w/attachable filter**

AR-2715805-2-FT

**2Ft Adult Nasal Pressure Cannula
w/attachable filter**



AR-2715802

7Ft Adult Nasal + Oral Pressure Cannula

AR-2715802-2

2Ft Adult Nasal + Oral Pressure Cannula

AR-2715802- FT

**7Ft Adult Nasal + Oral Pressure Cannula
w/ attachable filter**

AR-2715802-2-FT

**2Ft Adult Nasal + Oral Pressure Cannula
w/ attachable filter**

Pediatric Cannulas



AR-2715811



**7Ft Pediatric Nasal Pressure Capnography
Monitoring Cannula**

AR-2715804

7Ft Pediatric Nasal Pressure Cannula

AR-2715804-2

2Ft Pediatric Nasal Pressure Cannula

AR-2715804-FT

7Ft Pediatric Nasal Pressure Cannula w/filter

AR-2715804-2-FT

2Ft Pediatric Nasal Pressure Cannula w/filter



AR-2715807

Luer to O2 Adapter (5-pack)

AR-2715808

Male to male Luer Adapter (5-pack)

AR-2715809

Cannula Disposable Filter

AR-2715810

Cannula Adapter (3-pack)



ThermoCan™ Cannulas

- All-in-one, thermal and pressure design for optimal patient comfort
- One-Time-Use, no cleaning or breakage
- Low cost per use



AR-2715807

7Ft Adult Nasal ThermoCan™ Cannula



AR-2715807-2

NEW

2Ft Adult Nasal ThermoCan™ Cannula

Reusable ThermoCan™ Interface Cables

- Use with ThermoCan™ Cannulas to transmit the thermal airflow signal to your PSG system
- Tailored to your system specifications




AR-271474

Alice 5 Compatible Reusable ThermoCan™ Interface Cable



AR-271475

**Reusable ThermoCan™ Interface Cable
(Standard DIN Connector)**

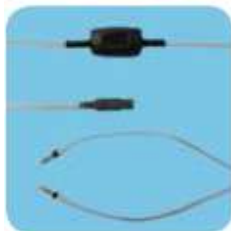

AR-271477

**Embla Compatible Reusable ThermoCan™
Interface Cable (Key Connector)**



AR-271478

**Sandman 20 Compatible Reusable ThermoCan™
Interface Cable**



Trasduttori respiro toracico - addominale adulto e pediatrico- neonatale monouso e adesivi



Elettrodi monouso e riutilizzabili di superficie a coppetta, disco, adesivi, monouso.

Con cavetti da 100 a 250cm con terminale.



Gel e Creme conduttivi, adesivi,

Gel e creme adesive e/o conduttive: EC2, Neurgel, AC Cream ELEFIX,, TEN 20, EVERI, NUPREP, SPECTRA 360, SIGNA CREAM

Creme sgrassanti e/o abrasive: SKINPURE, NUPREP, EVERI



Sensori SpO2 monouso e riutilizzabili per Nellcor, Nonin, Datex Ohmeda, Novamatrix-Respironics, Datascope, GE medical, Siemens, Draeger, altri.

[clicca qui per prezzo, descrizione, e ordine online](#)

Sul nostro sito web potete trovare anche altre soluzioni quali: Risonanza Magnetica, EMG, EEG, IONM, ECG, Ecografia, Fisioterapia, Anestesia e Emergenza, Ricambi per apparecchiature medicali come cavi ECG, SpO2, NIBP, Temperatura e cavi per Endoscopia-Elettrochirurgia.

contattate i nostri uffici per ulteriori informazioni

tel. 0521 346603 – fax 0521 641804

info@rebelmed.com – www.rebelmed.com

ALTRE APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI DISPONIBILI

Monitor palmare SpO2, EtCO2, Gas Alogenati, portatile, funzionamento a rete e batteria

CapnoTrue® MG – Multigas/SpO₂ Monitor
High-performance and versatile anaesthetic agent monitoring





CapnoTrue® AMP and CapnoTrue® ASP Mainstream and Sidestream CO₂/SpO₂ Monitors



Advanced and reliable capnograph and pulse oximeter combined in a single monitor.



PULSOSSIMETRO PALMARE PER RILEVAZIONI ESTEMPORANEE, CON ALLARMI E CONNESSIONE A PC

Disponibile anche versione senza ALLARMI



PULSOSSIMETRO A POLSO E A DITO A RIFLETTANZA

Per Screening Apnee notturne



Per Screening Apnee notturne

SPORT: Per utilizzo in ambito sportivo e durante gli allenamenti (Ciclismo, atletica, footing, fitness, wellness) con la possibilità di visualizzare le pulsazioni (battiti cardiaci) e valore di saturazione d'ossigeno (SpO_2), potrete valutare l'efficacia dei Vostri allenamenti e il Vostro stato fisico potendo anche collegare il pulsossimetro al computer di casa o del Vostro studio.

SLEEP APNEA il pulsossimetro a polso è stato sviluppato anche per utilizzo domiciliare per la valutazione e **screening** delle apnee notturne monitorando i parametri durante il sonno e fornendovi i dati su saturazione e pulsazioni (battiti cardiaci). Posizionandolo prima del sonno si possono avere i risultati all'indomani mattina al risveglio solamente collegandolo al Vostro Computer di casa o del Vostro studio (Grazie alla possibilità di memorizzare i dati fino a 12 ore di registrazione)



PULSOSSIMETRO A DITO

IL PULSOSSIMETRO A DITO A RIFLETTANZA È DOTATO DI BATTERIA CHE GARANTISCE UNA DURATA DI 500 ORE DI LAVORO O 40 GIORNI DI UTILIZZO IN CONTINUO. NON CONTIENE MOLLA PER APPLICAZIONE AL DITO O ALTRE PARTI FRAGILI; È STATO SVILUPPATO PER UTILIZZO PER PROFESSIONISTI, SPORTIVI E A DOMICILIO DEL PAZIENTE.

Maschere In tessuto per CPAP e BIPAP. Disponibili Nasali e Oro nasali.

Latex free, NO allergie, NO decubiti, NO arrossamenti sul Vostro viso



APPARECCHIATURE CPAP E CONCENTRATORI DI OSSIGENO

CPAP Modelli disponibili: CPAP Più piccola al mondo, modello con flusso fisso e modello "Automatico".

Utilizzabili solo maschere Nasali. **Clicca QUI per descrizione, prezzo listino, codici.**



CONCENTRATORE OSSIGENO Piccolo e portatile per utilizzo a casa, in vacanza, viaggio.

Funzionamento a batteria e a rete 220V – casa - . NON necessita di Bombola Ossigeno per Funzionamento.

PESO 2,2Kg; dimensioni: 22 x 18 x 8cm [Clicca qui per prezzi, descrizioni e ordini online](#)

